



Onze Roomer S plafondlift is een portable lift, die de mogelijkheid biedt om een cliënt in één transfer van de ene kamer naar de andere te verplaatsen zonder aanpassingen aan de deuropeningen.

Een comfortabele ervaring

De Roomer S biedt optimaal comfort bij gebruik met onze lustilbandenportfolio. De kamer-naar-kamerfunctie vermindert het aantal benodigde transfers en minimaliseert de belasting van zowel de cliënt als de zorgverlener. Het biedt een soft-start, soft-stop en constante tilsnelheid, ongeacht het gewicht en de richting van de cliënt, waardoor tillen een comfortabele ervaring wordt. De lift heeft een tilcapaciteit van 220 kg / 484 lb en kan worden gebruikt met een 2-, 3- of 4-punts tiljuk.

Uniek ontwerp

De Roomer S is ook geschikt voor kamers met schuifdeuren of branddeuren, aangezien er geen aanpassing aan de deuropening nodig is, waardoor de installatie veel eenvoudiger wordt. Voor faciliteiten maakt het unieke

ontwerp de noodzaak voor gates and turntables overbodig. De Roomer S heeft ook een lichtgewicht tiljuk met snelsluiting in twee verschillende breedtes geschikt voor de meeste tilsituaties. Opladen kan via de handbediening voor optimale efficiëntie.

Liftintelligentie

De Roomer S beschikt over een geavanceerd technologieplatform waarmee het gebruik van de lift kan worden gevolgd en de verzamelde gegevens kunnen worden gevisualiseerd. Met deze geïntegreerde liftintelligentie kunnen gegevens worden opgehaald met behulp van onze Data- en Serviceapplicatie op een tablet of computer. Gedetailleerde informatie kan direct in de applicatie worden bekeken of naar andere media worden geëxporteerd voor aanvullende analyse.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Accessoires



Tiljuk
Quick release voor optimaal gemak. Apart bestellen.
Art. nr.: 55763 (35 cm)
55751 (45cm)
55764 (55cm)



Basic Sling Net
Het Basic Sling Net is een voorbeeld van ons uitgebreide product portfolio.
Art nr: 25045-(size)




Handbediening
Twee snelheden met omhoog/omlaag-modus. Ingang voor opladen en USB-interface. IPX7 waterbeschermingsklasse.
Art. nr.: 71457



Upholstered Cover
Beschermt de gebruiker tegen impact van het tiljuk. Tiljuk wordt apart verkocht.
Art. nr.: 50866



Oplader Lift
Oplader met houder. Makkelijk aan de muur te bevestigen.
Art. nr.: 50899-US

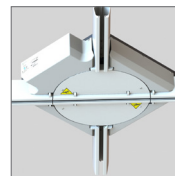

Gates and turntables
Biedt extra opties voor liftoverdracht op rails. Art. nr.: 55721 (Poort), 91884 (Draaischijf)



4-punts tillen
Maakt 4-punts tillen mogelijk. Geplaatst op beenhaak. Art. nr.: 55619



Distance Strap
Versterkte nylondraad en metalen haken. Verleng de tilband tot aan 100cm/39.3". Art. nr.: 20124-xx (specificeer lengte)



Secundaire controle
Secundair bedieningspaneel aan de achterkant van de lift voor noodstopfunctie. Geïntegreerde functie.



Lift Trolley
Vereenvoudigt het transport van de lift tussen kamers. Handige voor tilbanden opslag.
Art. nr.: 50346



Weegschaal
Medische schaal. Maximaal capaciteit 320kg/705,5lb. ISO- en EN-conform. Art. nr: 50590 (RoomerS & Altair)



Inzichten
Liftintelligentie op die cloudgebaseerde opslag van verzamelde gegevens mogelijk maakt. Geïntegreerde functie.

*Spreader Bar Small: 92441 is mechanisch

Technische specificaties

Specificaties	Roomer S		
Artikelnummer:	55300H-[landspecifieke code*]	Artikelnummer: (Tiljuk)	55763: 35 cm 55751: 45 cm 55764: 55 cm
Afmetingen (W x H x L):	40cm x 16cm x 30cm 15.7" x 6.2" x 11.8"		
Tilcapaciteit, max.:	220kg/484lb		
Gewicht van de Lift: Gewicht Tiljuk:	8,9kg / 19,6lb 1.3kg/2.8lb (55751) or 1.5kg/3.3lb (55764)		
Accu's:	2.9Ah, 2x12V		
Lader:	Ingaand: 100-240V, AC 50-60 Hz Uitgaand: 27.8V, 0.8A DC		
IP-klasse lift: IP-klasse handbediening:	IPX4 IPX7		
Tilhoogte een tilsnelheid:	Tilhoogte: 21.2cm/8.3" Tilsnelheid: 1.8m/min - 3m/min — 70"/min - 118"/min		
Goedkeuringen:	ROHS-2 oedgekeurd, getest en goedgekeurd volgens ISO 10535 ETL Listed		
Nooddaalfunctie:	Electronic and Mechanical		

*landspecifieke code: AU-Australia, GB-Great Britan, EU-Europe, JP-Japan, NA-North America

