



Onze HeliQ-lift is een moderne, discrete stationaire lift die in een railsysteem of vrijstaand opsteiling kan worden geïnstalleerd. Het is een oplossing die geschikt is voor zowel zorginstellingen, verpleeghuizen als thuiszorgomgevingen.

Eigentijds ontwerp

De HeliQ vaste plafondlift heeft een moderne, discrete uitstraling die gemakkelijk in elke omgeving past. Het kleine formaat zorgt voor gebruiksgemak in zowel institutionele als thuiszorgtoepassingen. De lift is verkrijgbaar in drie verschillende modellen met drie verschillende gewichtscapaciteiten. Het biedt optimaal comfort voor de cliënt met 2-punts of 4-punts tiljucken in verschillende lengtes die geschikt zijn voor vrijwel elke cliënt.

Liftintelligentie

De HeliQ beschikt over een geavanceerd technologieplatform waarmee het gebruik van de lift kan worden gevolgd en de verzamelde gegevens kunnen worden gevisualiseerd. Met deze geïntegreerde liftintelligentie kunnen gegevens worden

opgehaald met behulp van onze Data- en Serviceapplicatie op een tablet of computer. Gedetailleerde informatie kan direct in de applicatie worden bekeken of naar andere media worden geëxporteerd voor aanvullende analyse.

Power Traverse en In-Rail opladen

De HeliQ-liften kunnen optioneel worden aangesloten op een power traverse, waardoor zijdelingse gemotoriseerde beweging mogelijk is, inclusief de mogelijkheid om gordijnopeningen in rails te passeren. De HeliQ power traverse heeft dubbele snelheid, bescherming tegen water (IPX4) en een veilige werklust van 300 kg/661 lb. De HeliQ kan ook werken met in-rail opladen, waardoor de lift altijd gebruiksklaar is.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Accessoires



Tiljuk
Quick release voor optimaal gemak. Apart bestellen.
Art. nr.: 55751 (45cm/17.7")
55764 (55cm/21.7")



Elektrisch Kanteljuk
Voor gebruik met clip slings in ziekenhuis of andere zorgomgevingen. Art nr.: Small 92441*, Medium 92442, Large 92443




Handbediening
Twee snelheden met omhoog/omlaag-modus. Ingang voor opladen en USB-interface. IPX7 waterbeschermingsklasse.
Art. nr.: 71457



Upholstered Cover
Beschermt de gebruiker tegen impact van de tiljuk. Tiljuk wordt apart verkocht.
Art. nr.: 50866



Oplader Lift
Oplader met houder. Makkelijk aan de muur te bevestigen.
Art. nr.: 50899-US

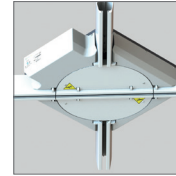

Gates and turntables
Biedt extra opties voor liftoverdracht op rails. Art. nr.: 55721 (Poort), 91884 (Draaischijf)



4-punts tiljukk
Maakt 4-punts tillen mogelijk.
Art. nr.: 55619



Distance Strap
Versterkte nylandraad en metalen haken. Verlengt de tilhoogte tot aan 100cm/39.3". Art. nr.: 20124-xx (specificeer lengte)



Secundaire controle
Secundair bedieningspaneel aan de achterkant van de lift voor noodstopfunctie. Geïntegreerde functie.



Power traverse
Maakt zijdelingse gemotoriseerde beweging mogelijk. Bestellen met lift.



Weegschaal
Medische schaal. Maximaal capaciteit 320kg/705.5lb. ISO- en EN-conform. Art. nr. 50590 (RoomerS & Altair) 50591 (Heliq)



Inzichten
Liftintelligentie op die cloudgebaseerde opslag van verzamelde gegevens mogelijk maakt. Geïntegreerde functie.

*Spreader Bar Small: 92441 is mechanisch

Technische specificaties

Specificaties	HeliQ 150	HeliQ 220	HeliQ 300
Artikelnummer:	55100- [landspecifieke code*]	55110- [landspecifieke code*]	55120- [landspecifieke code*]
Artikelnummer: (Power Traverse)	55130- [landspecifieke code*]	55140- [landspecifieke code*]	55150- [landspecifieke code*]
Artikelnummer: (Tiljuk)	72754, 72755, 75757	72754, 72755, 75757	72754, 72755, 75757
Afmetingen (W x H x L):	23.5cm x 14cm x 23.5cm 9.2" x 5.5" x 9.2"		
Tilcapaciteit, max.:	150kg/330lb	220kg/484lb	300kg/661lb
Gewicht van de Lift:	7kg/ 15.7lb		
Gewicht Tiljuk:	0.6kg/1.5lb (72754), 1.1kg/2.5lb (72755), 1.4kg/3.1lb (72757)		
Accu's:	2.9Ah, 2x12V		
Lader:	Ingaand: 100-240V, AC 50-60 Hz Uitgaand: 27.8V, 0.8A DC		
IP-klasse lift:	IPX4		
IP-klasse handbediening:	IPX7		
Tilhoogte een tilsnelheid:	Tilhoogte: 212,2 cm / 83,5" Tilsnelheid: 1.8m/min - 3m/min — 70"/min - 118"/min		
Goedkeuringen:	ROHS-2 oedgekeurd, getest en goedgekeurd volgens ISO 10535 ETL Listed		
Nooddaalfunctie:	Elektronisch en mechanisch		

*landspecifieke code: AU-Australia, GB-Great Britan, EU-Europe, JP-Japan, NA-North America