

Kabelloze rem

Brede rugband

Drie zithoogtes



Onze populaire klassieker

Onze klassieker opnieuw uitgevonden! De populaire 'lichtgewicht' loop hulpmiddelen van de neXus-serie zijn innovatieve rollators van hoge kwaliteit.



Gemakkelijk op te vouwen

De neXus 3 heeft een kruisframe waardoor deze snel, eenvoudig en zonder moeite in de breedte kan worden opgevouwen. Door de zachte ritssluiting van de meegeleverde tas vouwt deze gemakkelijk mee terwijl hij op de rollator bevestigd blijft. De rollator kan ingeklapt op zichzelf blijven staan en neemt daardoor minimale ruimte in.

Het rechte en compacte kruisframe biedt veel stabiliteit en daardoor wordt het gemakkelijk met de neXus op stap te gaan.

Het ergonomische rechte model zorgt er tevens voor dat de wielen niet ver uitsteken waardoor u veel loopruimte zult ervaren. De dubbel gelagerde voorvork garandeert soepel rijgedrag.



Brede rugband en kabelvrij

De brede gepolsterde rugband van de neXus kan worden omgedraaid zodat u op twee manieren kunt gaan zitten. Het stevige schuimkussen biedt een comfortabele rust mogelijkheid met een draagvermogen tot wel 200 kilogram.

Door het kabelvrije remsysteem behoort het blijven haken achter voorwerpen door remkabels tot het verleden. Dit nieuwe systeem zorgt voor jarenlang probleemloos gebruik.


De anatomische remhendels liggen goed in de hand, zijn makkelijk te bedienen en door de rode bal goed zichtbaar.

Er zijn vele accessoires leverbaar waardoor de neXus 3 nog beter op uw wensen aansluit!

De neXus 3 staat gegarandeerd voor uren veilig wandelplezier en is MDR gecertificeerd als medisch hulpmiddel.



Gebruik

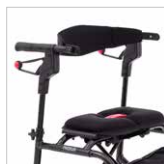

Gewatteerde rugband
Comfortabele steun in de rug tijdens het zitten. Kan in twee richtingen worden omgedraaid en wordt meegeleverd met de rollator.



Zitting met schuimkussen
Biedt een comfortabele zitplaats tijdens het lopen.



Anatomische remgrepen
De anatomische remgrepen zijn gemakkelijk en comfortabel in gebruik.

Accessoires



Dienblad
Praktisch voor het meenemen van kleine items. Maximale lading 2 kg. Artikelnummer: 93316.



Harde mand
Voor het vervoeren van bijvoorbeeld boodschappen. Maximale lading 5kg. Artikelnummer: 4510.



Stokhouder
Altijd uw stok of paraplu bij de hand. Artikelnummer: 93317.



Bekerhouder
Bevestigt in seconden zonder gereedschap. Geschikt voor standaard fles en beker. Artikelnummer: 90394



Drempelhulp
Maakt het gemakkelijk om de rollator over een drempel of stoeprand te kantelen. Artikelnummer: 93315.



Identificatielabel
Groen. Te bevestigen aan de rollator in seconden voor het herkennen van uw rollator. Artikelnummer 90393.



Stoffen tas
Lichte tas die kan worden opgevouwen met het mobiliteitshulpmiddel. Maximale capaciteit 5kg



Rem vertrager
Voorkomt dat de rollator te snel beweegt en maakt een gecontroleerde loopsnelheid mogelijk.

Technische specificaties

Artikelnaam	Artikelnummer	Hoogte handvat (Min - Max)	Zithoogte	Totale breedte	Breedte tussen handgrepen	Afstand tussen achterwielen	Wielmaat	Productgewicht
neXus 3 Extra laag	470018	78 cm - 86 cm	48 cm	58 cm	45 cm	47 cm	20 cm x 3 cm	7.6 kg
neXus 3 Laag	470022	78 cm - 93 cm	56 cm	58 cm	45 cm	47 cm	20 cm x 3 cm	7.7 kg
neXus 3 Standaard	470024	83 cm - 101 cm	61 cm	58 cm	45 cm	47 cm	20 cm x 3 cm	7.8 kg

Maximaal gebruikersgewicht: 200 kg



We improve freedom of movement and quality of care for people.

