



Veelzijdig
Unieke handvatten
Flexibel frame



De Rebel is ontworpen voor gebruikers die het moeilijk vinden om een gewone rollator te manoeuvreren of extra ondersteuning nodig hebben. De onderarmsteunen zijn in hoogte en hoek verstelbaar en kunnen in de beste positie worden gezet voor optimaal comfort en stabiliteit.

Uitstekende stabiliteit

De Rebel RA is de ideale rollator voor pijngevoelige gebruikers met klachten als artritis, Parkinson of vele andere neurologische aandoeningen. Het beschikt over aparte onderarmsteunen en grote wielen met kogellagers die ervoor zorgen dat lopen gemakkelijk gaat, zelfs op oneffen of ruwe oppervlakken. De Rebel RA kan zowel binnen als buiten worden gebruikt en kan worden voorzien van een breed assortiment aan accessoires, waaronder een zitje en mand.

Unieke handvatten

De Rebel RA is voorzien van unieke, naar voren gerichte, onder een hoek verstelbare handvatten waarmee de gebruiker de optimale positie voor de handen kan vinden

voor comfort en stabiliteit. De afstelling is eenvoudig met geïntegreerde maatverdeling direct op de handvatbuis. Het ergonomische ontwerp van de handvatten zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het gewicht. De Rebel RA kan ook worden uitgerust met een eenzijdige rem, zodat een eindgebruiker de handfuncties aan de linker- of rechterkant kan bedienen.

Verstelbare onderarmsteunen

De Rebel RA beschikt over zeer unieke onderarmsteunen die zowel in hoogte als in richting verstelbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat de onderarmsteunen op de best mogelijke manier kunnen worden gepositioneerd voor optimaal gebruikerscomfort en stabiliteit.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone:- +46 8 665 35 00
Fax:- +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Accessoires/Kenmerken



Dienblad

Handig om lichte voorwerpen op te zetten. Maximale belasting 2 kg. Art. nr. 10601



Mand

Maximale belasting 4,5 kg. Ideaal om te winkelen. Art. nr. 10621



Veiligheidsslot

Flex-snoer dat de rollator beschermt tegen diefstal als er geen toezicht op wordt gehouden. Art. nr. 91092



Vertragsrem

Vooromt dat de rollator te snel beweegt en maakt een gecontroleerde loopsnelheid voor de gebruiker mogelijk. Artikelnr.: 10624




Verlichting

Geeft betere zichtbaarheid tijdens het lopen. Art. nr. 91091




Stoephulp

Helpt de rollator op een stoeprand te komen. Art. nr. 10612

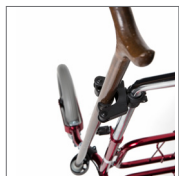


Wandelstokhouder

Eenvoudig vervoeren van een wandelstok of paraplu. Art. nr. 10603

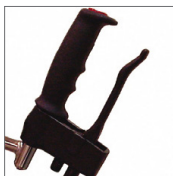

Eenhandige rem

Hiermee kan de eindgebruiker met één hand functies bedienen (monteer links/rechts). Speciaal bestellingsartikel. Art. nr. Laag 10653, Standaard 10654

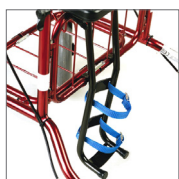

Zuurstoffeshouder

Houdt de zuurstofslang stevig op zijn plaats. Art. nr. 10615



Zitkussen

State-of-the-art technologie houdt het kussen koel in de zomer en warm in de winter. Art. nr. 91093

Technische specificaties

Beschrijving	Art. nr.:	Breedte tussen handgrepen	Totale breedte	Hoogte hendel (Min-Max)	Gewicht product
Rebel RA 67 Laag	22311 223111 (met zitting)	40,6 cm	67 cm	86 cm-104 cm	11,3 kg
Rebel RA 67 Nor	22321 22321-1 (met zitting)	40,6 cm	67 cm	104 cm - 122 cm 40.9" - 48"	11,5 kg
Rebel RA 72 Laag	22411 224111 (met zitting)	50,8 cm	72 cm	86 cm-104 cm	11,4 kg
Rebel RA 72 Nor	22421 22421-1 (met zitting)	50,8 cm	72 cm	104 cm - 122 cm 40.9" - 48"	11,6 kg

Beschrijving (alle modellen)	
Zithoogte	Laag 54 cm Nor 62 cm/
Wielafmeting	20 cm x 4 cm
Maximumgewicht eindgebruiker	125 kg