



Comfortabel

Smal ontwerp

Hoofdsteun



Silhouette Sling Soft
Art. Nr. 25019



Silhouette Sling Polyester Net
Art. Nr. 25015

De Silhouette tilband is een comfortabele tilband zonder baleinen, handvatten of verstevigingen. De tilband vormt zich naar de patiënt en biedt goede ondersteuning voor het hele lichaam. De tilband kan in de meeste til-situaties worden gebruikt, maar is vooral geschikt voor transfers naar rolstoelen, gevormde stoelen of speciale zittingen.

Verschillende materialen

De Silhouette Sling is verkrijgbaar in Polyester Net of Soft Air Mesh, dat vocht en warmte effectief afvoert van de cliënt. De tilband is hiermee uiterst geschikt als verblijfsband. De polyester netstof is flexibel, luchtig en droogt snel waardoor het geschikt is voor nat gebruik.

Kwaliteit

Onze tilbanden zijn vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Ze beschikken over stevige banden en zeer sterke nylon randen rondom de tilband, dit maakt de tilbanden sterk genoeg voor actief gebruik.

Smal ontwerp

De Silhouette Sling heeft een smalle overall breedte waardoor het een ideale optie is voor gebruikers die kleiner van postuur zijn. De Silhouette Sling kan worden gebruikt voor de meeste situaties waar een 2-punts, 3-punts of 4-punts juk wordt gebruikt, daarnaast is de tilband geschikt voor patiënten met slechte rompstabiliteit. De Silhouette Sling is ook verkrijgbaar in de maten Junior Small tot Extra Large.



Accessories



Verlenglusen

Gebruikt om de banden te verlengen om de positie van de cliënt te veranderen of om het been van de cliënt vast te houden.
Artikelnummer: 21180*



Beenvulling en -steunen

Ideaal voor gebruikers met gevoelige huid of pijn.
Beenvulling: Artikelnummer: 21146-S, M, L
Versterkte steunen in één maat.
Artikelnummer: 25102



Gestoffeerde hoes

Bescherm de gebruiker.
Niet geschikt voor gebruik in een natte omgeving.
Artikelnummer: 50866



Jukken voor 2-, 3- of 4-punts bevestiging

Artikelnummer: 57551, 55764 (2- of 3-punts juk), 55619: (4-punts juk)

Gebruik



Tillen van/naar het bed

Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar een stoel


Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



Douchen

Polyester Net materiaal is geschikt voor natte omgeving.

Onderhoud en functies

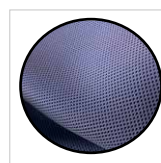

Soft Air Mesh

Geweldig drukverlichtend effect. De druk is goed verdeeld binnen de 3D-structuur van de stof. Voorkomt en beschermt.



Polyester Net

Zacht, dun materiaal dat ademt en snel droogt. Ideaal voor douchen en badderen.

Artikelnummer: 25005C.




Verzorgingsinstructies

Was- en verzorgingsinstructies op het label van de tilband. Gebruik een goedgekeurde waszak tijdens het wassen.

Technische specificaties

| Artikelnummer | | Maat | Kleur | A | B | C | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|----|---------------|---------------|----------------|
| Polyester Net | Polyester Net padded leg | Soft Air Mesh | | | | | |
| 25015-JS | 25018-JS | 25019-JS | Junior Small | JS | 18 cm / 7,1" | 62 cm / 24,4" | 64 cm / 25,2" |
| 25015-JM | 25018-JM | 25019-JM | Junior Medium | JM | 22 cm / 8,7" | 67 cm / 26,4" | 71 cm / 28" |
| 25015-S | 25018-S | 25019-S | Small | S | 26 cm / 10,2" | 77 cm / 30,3" | 79 cm / 31,1" |
| 25015-M | 25018-M | 25019-M | Medium | M | 29 cm / 11,4" | 87 cm / 34,2" | 90 cm / 35,4" |
| 25015-L | 25018-L | 25019-L | Large | L | 35 cm / 13,8" | 93 cm / 36,6" | 96 cm / 37,8" |
| 25015-XL | 25018-XL | 25019-XL | Extra Large | XL | 40 cm / 15,8" | 97 cm / 38,2" | 106 cm / 41,8" |
| Maximaal gebruikers-gewicht: | | 300kg / 660lb | | | | | |

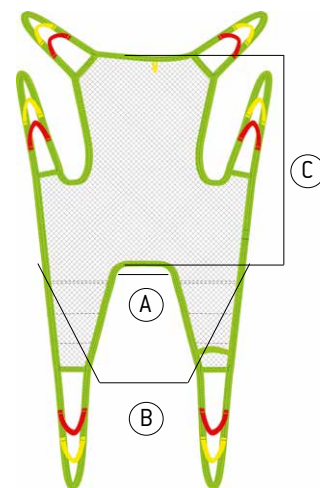

* Verkrijgbaar in verschillende lengtes: 10 cm (21180-10), 15 cm (21180-15), 20 cm (21180-20), 25 cm (21180-25), 35 cm (21180-35)



Wij bieden bewegingsvrijheid en uitstekende kwaliteit van zorg.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
info@humancaregroup.com

HUMAN CARE GERMANY

Industriestraße 13, Gebäude 1/9
63755 Alzenau
+49 (0) 6023 994 936 8
infode@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE THE NETHERLANDS

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin
+1 5 124 76 7199
info.us@humancaregroup.com