



De Rebel is een compacte rollator, die ideaal is voor binnen en buiten. Het reactieve frame is stabiel, maar u kunt het toch makkelijk manoeuvreren. De Rebel heeft ergonomische handgrepen die verstelbaar zijn, zodat de eindgebruiker een optimale positie voor zijn/haar handen kan vinden. De rollator heeft een makkelijk verticaal opklapsysteem, zodat bukken niet nodig is en het eenvoudig is te transporteren.

Perfect voor binnen of buiten

Of u nu thuis of onderweg bent, de Rebel is de perfecte keuze. Het reactieve frame in combinatie met stabiele wielen zorgen ervoor dat de rollator soepel voortbeweegt over vrijwel elk oppervlak. De Rebel is verkrijgbaar in een groot aantal breedtes, zodat deze veelzijdige rollator vrijwel overal gebruikt kan worden. Het versterkte model voor de wat zwaardere eindgebruiker is geschikt voor een belasting van 250 kg.

Eenvoudig opklapsysteem

De Rebel kan makkelijk worden opgeklapt met een handige handgreep die in de zitting is geïntegreerd. Ook in opgeklapte positie blijft de rollator zelfstandig staan. Het

compacte formaat en het opklapsysteem maken het een ideale optie voor transport en reizen. De Rebel, die hier wordt getoond met mand en rugriem¹, beschikt over een volledig assortiment accessoires om aan de uiteenlopende behoeften van elke individuele eindgebruiker te voldoen.

Ergonomische handgrepen

Voor de beste ergonomie hebben de handgrepen zo veel grip en comfort dat het gewicht gelijkmatig wordt verdeeld. Daarnaast zijn de hoek en de hoogte van de handgrepen van de Rebel verstelbaar, zodat voor elke eindgebruiker een optimale handpositie gevonden kan worden.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Telefoon: +46 8 665 35 00
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Telefoon: +613.723.6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Telefoon: +31 577 412 171
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Telefoon: +512.476.7199
info.us@humancaregroup.com

Accessoires




Dienblad

Handig om lichte spullen op te zetten. Maximale belasting 2 kg. Artikelnr. 10651



Infuuspaalhouder

Deze infuusstandaard kan eenvoudig aan de Rebel bevestigd worden. De infuuspaal heeft twee haken aan de bovenzijde voor het eenvoudig plaatsen van infuuszakjes. Artikelnr. 92907

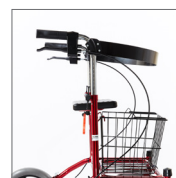

Rugsteun en mand

Rugsteun Artikelnr. 10621, 10655 (voor 72 cm) Mand Artikelnr. 10601



Vertragsrem

Voorkomt dat de rollator te snel beweegt en maakt een gecontroleerde loopsnelheid voor de eindgebruiker mogelijk. Artikelnr. 10620




Duwhandel

Met deze duwhandel kan de gebruiker de handen voor het lichaam houden in plaats van aan de zijkanalen. Bij dit product wordt tevens een éénhandsrem geleverd die op de duwstang gemonteerd wordt. Artikelnr. 70844




Tassenset

Eén kleine (5 kg capaciteit) en één grote tas (10 kg capaciteit). Artikelnr. 91095 (voor 62 cm), 91096

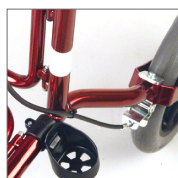

Wandelstokhouder

Handig om een wandelstok of paraplu mee te nemen. Artikelnr. 10603

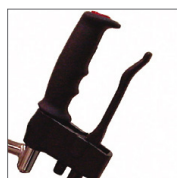


Eenhandige rem

Hiermee kan de eindgebruiker de handbediende functies met één hand bedienen (links of rechts). Moet speciaal worden besteld. Artikelnr. 10652



Zuurstoffleshouder

Houdt de zuurstoffles stevig op zijn plaats. Artikelnr. 10609

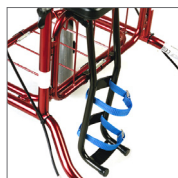

Zuurstoffleshouder

Houdt de zuurstoffles stevig op zijn plaats. Artikelnr. 10615



Zitkussen

State-of-the-art technologie houdt het kussen koel in de zomer en warm in de winter. Artikelnr. 91093



Spatscherm

Bescherm benen en kleding. Artikelnr. 10608

Technische specificaties

Omschrijving	Artikelnummer	Min. Hoogte hendel	Max. Hoogte hendel	Zithoogte	Totale breedte	Breedte tussen handgrepen	Wielen	Gewicht product	Maximum gewicht eindgebruiker
Rebel 57	22140	75 cm	93 cm	62 cm	57 cm	37 cm	20 x 4 cm	9.5 kg	140 kg
Rebel 62	22240	75 cm	93 cm	62 cm	62 cm	42 cm	20 x 4 cm	9.6 kg	140 kg
Rebel 67	22340	75 cm	93 cm	62 cm	67 cm	47 cm	20 x 4 cm	9.7 kg	140 kg
Rebel 72	22440	75 cm	93 cm	62 cm	72 cm	52 cm	20 x 4 cm	9.9 kg	140 kg
Rebel laag 57	22141	68 cm	86 cm	54 cm	57 cm	37 cm	20 x 4 cm	9.2 kg	140 kg
Rebel laag 62	22241	68 cm	86 cm	54 cm	62 cm	42 cm	20 x 4 cm	9.4 kg	140 kg
Rebel laag 67	22341	68 cm	86 cm	54 cm	67 cm	47 cm	20 x 4 cm	9.5 kg	140 kg
Rebel laag 72	22441	68 cm	86 cm	54 cm	72 cm	52 cm	20 x 4 cm	9.7 kg	140 kg
Rebel versterkt 62	71221	75 cm	93 cm	62 cm	62 cm	42 cm	20 x 4 cm	11.5 kg	250 kg
Rebel versterkt 67	71321	75 cm	93 cm	62 cm	67 cm	47 cm	20 x 4 cm	11.6 kg	250 kg
Rebel versterkt 72	71421	75 cm	93 cm	62 cm	72 cm	52 cm	20 x 4 cm	11.8 kg	250 kg
Rebel hoog 57 cm	22144	80 cm	98 cm	62 cm	57 cm	37 cm	20 x 4 cm	9.5 kg	140 kg
Rebel hoog 62 cm	22244	80 cm	98 cm	62 cm	62 cm	42 cm	20 x 4 cm	9.6 kg	140 kg
Rebel hoog 67 cm	22344	82 cm	100 cm	62 cm	67 cm	47 cm	20 x 4 cm	9.7 kg	140 kg
Rebel hoog 72 cm	22444	82 cm	100 cm	62 cm	72 cm	52 cm	20 x 4 cm	9.9 kg	140 kg