

# Mobi Pro Flexi



Compact  
Comfortabel  
Eenvoudig



De Mobi Pro Flexi is een ergonomisch en compact mobiel hulpmiddel voor het uitvoeren van transfers, ideaal voor mensen met weinig beenkracht en enige rompbalans die moeite hebben met lopen en tot stand komen. De Mobi Pro Flexi is een uitstekende veilige transfer hulpmiddel voor vroege mobilisatie. Het biedt ondersteuning tijdens het staan en is een efficiënt hulpmiddel voor het verplaatsen van patiënten, waardoor de veiligheid en efficiëntie worden verbeterd.



## Draaibare stoel

De Mobi Pro Flexi is een efficiënt en veilig hulpmiddel voor de zorgverlener om een patiënt te verplaatsen, wat de veiligheid van de zorgverlener verbetert. Het beschikt over gepolsterde zitsteunen kniesteun voor comfortabel gebruik. De voeten worden op een stevige voetplaat geplaatst en vervolgens trekt de patiënt zichzelf omhoog naar een staande positie met behulp van de geïntegreerde stevige beugel. Door simpelweg de zitsteunen te draaien, wordt de Mobi Pro Flexi een comfortabele stoel waarop de patiënt kan rusten en zich kan verplaatsen.

veilig transport van een cliënt naar bed, stoel of toilet en terug indien nodig. De Mobi Pro Flexi is uitgerust met een mechanisch pootspreiding, zodat het bij de meeste zitplaatsen (zoals een toilet of rolstoel) toepasbaar is. Het ruime instelbereik is eenvoudig met een hendel in drie standen te zetten.

## Kwaliteit

Onze producten zijn ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan alle vereisten van relevante normen. In elke fase van het ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk product uitgebreide aandacht in ontwerp, ontwikkeling en productie. Dit betekent dat een gebruiker van dit product vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid en dat de zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid ervan.



## Veelzijdig ontwerp

Het gebruik van de Mobi Pro Flexi stimuleert niet alleen mobilisatie en activiteit, maar geeft de zorgverlener ook snel, stabiel en



Walking Aids



Healthcare Beds



Lifting Solutions



Hygiene



Convertible chairs

## Accessories




### Voetplaat

Meegeleverd met apparaat.  
Duurzaam ABS-kunststof.  
Vervanging  
Artikelnr. 1590035



### Zwenkwielen

Dubbel wiel 7,5 cm/3". Voorkant  
Artikelnr. 1690060

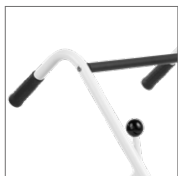

### Ergonomische handgrepen

Gemaakt van rubber. Verkocht  
in een set van twee. Vervanging  
Artikelnr. 1510054

## Lifting Situations



### Gebruik van/naar een bed

Gebruik om een patiënt van/  
naar een bed te verplaatsen.




### Gebruik van/naar een stoel

Gebruik om een patiënt van/  
naar een bed te verplaatsen.



### Gebruik van/naar het toilet

Gebruik om een patiënt van/  
naar een toilet te verplaatsen.

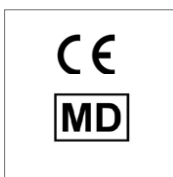

Getest volgens alle relevante  
normen, waaronder ISO 14971,  
EN12182, MDD 93/42/EEG.

## Features




### Gemakkelijke beweging

De Mobi Pro Flexi is eenvoudig  
te verplaatsen door een enkele  
zorgverlener. Een kleine  
draaicirkel maakt hem ideaal  
voor kleinere ruimtes.



### Verstelbare basis

Handmatige aanpassing van  
de pootspreiding zorgt ervoor  
dat het onder de meeste  
stoelen past.

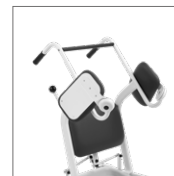

### Gepolsterde zitsteunen

Maakt het mogelijk om het  
apparaat als zitplaats te  
gebruiken als alternatief voor  
een rolstoel.



### Gepolsterde kniesteun

Comfortabel kniekussen om de  
patiënt meer comfort te bieden  
en de druk op de knieën tijdens  
het staan te verminderen.

## Technical Specifications

Mobi Pro Flexi			
Artikelnummer:	11992145	Verstelbare poot (Min - Max)	43cm - 70cm
Breedte	58.5cm	Hoogte handvat (Inclined at Angle)	92cm - 100cm
Lengte	97cm	Gewicht	19.6kg
Hoogte	104cm	Draagvermogen	150kg
Wiel diameter	7.5cm		

99045, Rev 01, NL, Product Sheet, Mobi Pro Flexi, May 22



*We improve freedom of movement  
and quality of care for people.*

[www.humancaregroup.com](http://www.humancaregroup.com)



**HUMAN CARE SWEDEN (HQ)**  
Årstaängsvägen 21B  
117 43 Stockholm  
+46 8 665 35 00  
info@humancaregroup.com

**HUMAN CARE CANADA**  
10-155 Colonnade Road  
ON K2E 7K1 Ottawa  
+1 613 723 6734  
info.ca@humancaregroup.com

**HUMAN CARE THE NETHERLANDS**  
Elspeterweg 124  
8076 PA Vierhouten  
+31 577 41 21 71  
info.nl@humancaregroup.com

**HUMAN CARE UNITED STATES**  
8006 Cameron rd, Suite K  
TX 78754 Austin  
+1 5 124 76 7199  
info.us@humancaregroup.com